

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

APARAT PENTRU BIOREZONANȚA DIN NOUA GENERAȚIE ZAPPER – S5 AUTOMATIC



ZAPPER S5-AUTOMATIC

DESCRIERE TEHNICĂ ȘI INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE

1. SCOPUL ȘI PRINCIPIUL LUCRĂRII

Generator Bio-wave Zapper S5-AUTOMAT (în continuare Zapper in text *) este un dispozitiv digital electronic, care ucide boala cauzatoare de paraziți, bacterii și viruși pe principiul biorezonanței electromagnetice fără utilizarea medicamentelor.

Această metodă a fost descoperita de Dr. Royal Raymond Rife (Royal Raymond Rife) în anii '30 ai secolului al XX-lea. Descoperirea sa a ramas uitată până când Dr. Hulda Clark (Hulda Clark) a publicat rezultatele cercetărilor lor în cartea „Tratament pentru toate bolile“, bazate pe teoriile lui Dr. Rife. Zapper ce permite un tratament eficient al ambelor boli acute și cronice în etiologia și patogeniza care joacă un rol proeminent parazitar, bacterian și infecții virale.

Aparatul poate fi utilizat atât acasă, cât și în cabinetele fizioterapeutice ale spitalelor.

În timpul sesiunilor terapeutice, pacientul se leagă de Zapper printr-o pereche de electrozi care pot fi în contact cu ambele mâini sau ambele picioare, precum și în diagonală între mână și picior.

* Numele "Zepper" provine de la verbul englez, zapping, dropping, uciderea, iar sub zapping este procesul de erupție selectivă a patogenilor de către undele electromagnetice.

2. CARACTERISTICI TEHNICE.

No	Parametru	Valoare
1.	Sursă de alimentare	Baterie gen 6F22 (6LF22), 9 V
2.	Consum	Nu mai mult de $5,5 \cdot 10^{-3}$ A
3.	Putere	Nu mai mult de 0,05 W
4.	Numărul de sesiuni cu o baterie	Nu mai puțin de 20
5.	Frecvența și amplitudinea semnalului	30 kHz $\pm 1\%$; 9V
6.	Puterea curentului	Nu mai mult de $1 \cdot 10^{-3}$ A
7.	Mod de operare	Cyclit, prelungit
8.	Numărul de cicluri de impact	3
9.	Durata totală a sesiunii	61 min $\pm 5\%$
10.	Clas de protecție	II
11.	Condițiile climatice pentru funcționare: - temperatura ambiantă; - umiditatea relativă a aerului;	18 – 24 °C 65 – 80 % la 20°C
12.	Masa produsului	240 g

3. INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE

Înainte de utilizare, despachetați aparatul. Dacă este adus de afara cu temperatură scăzută, este necesar să stați să devină la temperatura camerei timp de cel puțin o oră înainte de a porni pentru a preveni deteriorarea sau defecțiunea.

Pe partea din spate a aparatului se află soclul bateriei (fig.1). Apăsați în jos (1) și scoateți (2) capacul soclului. Trageți clema acumulatorului (fig. 2) și conectați o nouă baterie 9 V de tip 6F22 sau 6LF22. Aveți grijă atunci când plasați bateria.

Instrucțiuni de utilizare Zapper S5 AUTOMATIC

Are electrod mai larg negativ și electrod îngust pozitiv (fig.3). Clema bateriei are aceeași formă și dimensiune cu a contactelor. Orientați acumulatorul la clema, așa cum se arată în figura 4. și apăsați-le să se blocheze (fig.5).

Introduceți bateria în priza bateriei (figura 6) și apăsați-l în jos. Așezați capacul (fig.7) și apăsați-l în secvența din fig



fig.1



fig.2



fig.3



fig. 4



fig.5



fig.6



fig.7

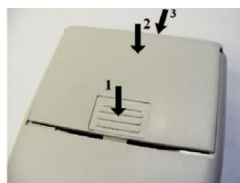


fig.8

Calitatea bateriei determină numărul de sesiuni de tratare care pot fi efectuate până când capacitatea sa este complet epuizată. În cazul în care aparatul nu va fi folosit mult timp, scoateți bateria pentru a preveni scurgerea electrolitului și deteriorarea ulterioară.

pe fig. 9 sunt afișate butoanele de comandă și indicație



Fig. 9 placa frontală a dispozitivului

1 – indicator pentru contact cu electrozi; 2 – indicatoare pentru cicluri; 3 – indicator pentru pauza; 4 - buton pentru pornire și oprire; 5 – indicator pentru starea bateriei,

Aparatul se pornește după ce apăsați pe butonul 4 (I/O). Dacă ați pus corect bateria indicatorul, deasupra butonului se va aprinde și se va auzi un sunet scurt. Indicatorul pentru electrozi 1 (**ELECTRODES**) rămâne aprins.

Instrucțiuni de utilizare Zapper S5 AUTOMATIC

Prindeți electrozii cu ambele mâini sau prindeți un electrod cu o mână și plasați piciorul gol al mainii opuse pe celălalt electrod. Dacă contactul electric cu electrozii este bun, indicatorul 1 "ELECTRODES" se va stinge și indicatorul ciclului 1 va începe să clipească, indicând faptul că instrumentul funcționează în primul ciclu. Dacă, în contact cu electrozii, dispozitivul nu trece automat la primul ciclu, aceasta indică faptul că pielea este uscată și nu conduce în mod adecvat curentul electric. Pentru a îmbunătăți contactul, umeziți ușor pielea mâinilor.

Curentul este limitat la o valoare sigură. În timpul sesiunii nu veți simți iritarea pielii sau spasmele musculare. Acest lucru este posibil numai la persoanele cu sensibilitate crescută.

Păstrați electrozii până la sfârșitul ciclului de funcționare. După încheierea ciclului, va fi auzit un sunet scurt. Indicatorul ciclului 1 se va stinge și indicatorul 3 "PAUZĂ" va clipi. În timpul pauzei puteți lăsa electrozii. După ce a trecut pauza, se aude un semnal sonor indicând începutul celui de-al doilea ciclu și așa mai departe.

ELECTROZI NU TREBUIE SA SE ATINGA! BATERIA SE SCURGE MAI REPEDE.

Indicatorul acumulatorului Batt 5 este aprins când este descărcat la nivel critic și trebuie înlocuit cu unul nou. Luminarea indicatorului în timpul unei sesiuni nu înseamnă că sesiunea trebuie terminată. Lăsarea încărcării bateriei este suficientă pentru a continua funcționarea până când sesiunea este finalizată. Pentru următoarea sesiune, este imperativ să înlocuiți bateria cu una nouă.

Aparatul are trei cicluri de funcționare de șapte minute separate de două pauze de douăzeci de minute:

**Ciclu 1
7 min.**

**Pauza 1
20 min.**

**Ciclu 2
7 min.**

**Pauza 2
20 min.**

**Ciclu 3
7 min.**

Sesiune 61 min.

Când primul ciclu este terminat, aparatul emite un semnal sonor, indicatorul pentru primul ciclu se stinge și se aprinde indicatorul 3 ("Întrerupere"). În următoarele douăzeci de minute

puteți lăsa electrozii lateral și puteți aștepta. Când electrozii nu sunt în contact cu corpul, indicatorul 1 ("Electrozi") nu se va aprinde.

După douăzeci de minute, se aude semnal sonor care indică începutul celui de-al doilea ciclu. Indicatorul 3 ("Pauză") se stinge și indicatorul celui de-al doilea ciclu clipește. Prindeți electrozii. Dacă indicatorul 1 ("Electrozi") clipește, înmuiiați pielea mâinilor pentru a îmbunătăți contactul.

După ce al doilea ciclu a trecut, a doua pauză și așa mai departe. După ce a trecut treilea ciclu, se aude un semnal sonor și apoi dispozitivul se oprește automat.

Dacă trebuie să opriți sesiunea pe scurt, nu trebuie să opriți aparatul. Este suficient să lasați jos electrozii. Aparatul intră automat în modul de așteptare. Puteți întrerupe funcționarea instrumentului în timpul fiecărui ciclu, fără timp de întrerupere. Pentru a continua să lucrați, trebuie doar să luați din nou electrozii.

Puteți opri aparatul apăsând butonul 4 (I / O). Oprirea dispozitivului face ca ciclurile să fie citite la zero. Următoarea sesiune începe cu primul ciclu.

Pentru a efectua în mod eficient sesiunile, alegeți un loc liniștit corespunzător - un pat, canapea sau fotoliu, departe de zgomotul și sursele de radiații electromagnetice (TV, cuptor cu microunde, telefoane mobile), care pot duce la funcționarea incorectă. Nu purtați material sintetic. Ele generează sarcini electrice statice care reduc efectul procedurilor.


4. PUNEREA ÎN APLICARE

Durata acțiunii depinde de gravitatea și durata bolii și poate fi de la 7 la 28 de zile cu sesiuni zilnice. Dacă este necesar, cursurile se repetă după o pauză de două până la trei săptămâni. Până când simptomele vor dispărea!

Pentru profilaxie, se efectuează o sesiune pe zi timp de șapte zile. În bolile acute, sesiunile pot fi repetate de 2-3 ori pe zi timp de 20-28 zile.

Instrucțiuni de utilizare Zapper S5 AUTOMATIC

EXEMPLUL SCHEMEI PENTRU IMPLEMENTARE

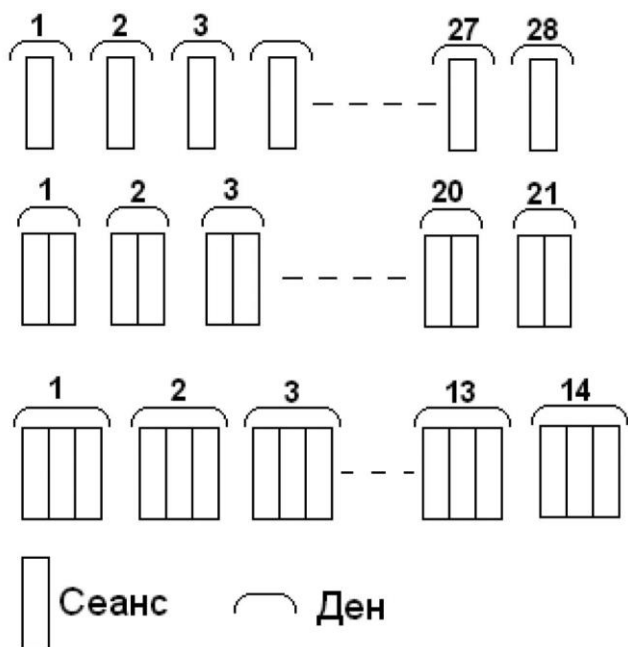

5. CONTRAINDICAȚII

Nu se recomandă utilizarea în timpul sarcinii sau alăptării, copii sub 5 ani și oameni cu stimulanți cardiace.

O adevărată curățare a corpului

Aparatul asupra modelului Zapper S5-AUTOMATIC face posibilă obținerea unor rezultate excelente pentru o perioadă scurtă de timp. O condiție prealabilă pentru eficiența și susținerea maximă a corpului în timpul utilizării aparatului este respectarea mai multor condiții:

1. Respectați în mod explicit instrucțiunile de utilizare a aparatului.

2. Efectul maxim pentru a purifica organismul și a susține procesele metabolice se realizează cu o combinație de utilizare a dispozitivului cu apă de argint și planta medicinală sedemchatka (pelin, nuc și cuișoare, armurariu, păpădie, ulei de oregano, pas de pisica).

Între aportul de apă de argint și planta medicinală trebuie să aveți un interval de 30-40 minute. Aceasta este o garanție pentru eliminarea paraziților morți din corp și pentru susținerea echilibrului intern în activitatea microflorei utile.

3. Tratați alimentele care conțin gluten, drojdie, zahăr alb și proteine animale în timpul tratamentului. Lactatele și alimentele locale, dacă nu pot fi restricționate este necesar să le tratați termic (gătit, copt).

CELE MAI INTANLITE ÎNTREBĂRI?

Câte proceduri se fac zilnic și pentru cât timp? Faceti de la 1 la 3 proceduri, sesiuni zilnice timp de 15-30 de zile. Apoi, întrerupeți și, dacă este necesar, repetați procedura până când dispar simptomele. Atunci când dispozitivul este utilizat profilactic suficient de 1-2 sesiuni, "săptămânal".

Este de dorit să utilizați totii membrii familiei (chiar și copii).

De ce este necesar pentru o perioadă extinsă de tratament? Aparatul biosphere Zapper -S5 AUTOMATIC distruge toate tipurile de paraziți cu o singură procedură.

Cu toate acestea, ciuperca Candida (un oaspete neinvitat, dar prezent în fiecare organism) !!!

Cel mai mare dușman al omului, în paralel cu paraziții.

Acesta trăiește în interiorul celulelor din celule (în multe straturi) și este distrus pentru o lungă perioadă de timp!

Acesta este motivul pentru care este necesară o perioadă de tratament de 15-30 de zile pentru a distruge / elimina complet!

S-a demonstrat că, în plus față de problemele de sănătate de orice fel ... ciuperca „Candida albicans“, nu mai puțin decât paraziți, este cauza principala a chisturilor, tumorilor și a cancerului!

Este adevărat că Zaperr S5-AUTOMATIC tratează bolile descrise?

Boli și diagnostice sunt mii! Și cauzele sunt paraziții, virușii și bacteriile. Medicină modernă, diagnosticele și "simptome de vindecare"! Tratamentul adevărat este atunci când este tratat, elimină cauza! Zaperr S5-AUTOMATIC elimină cauzele bolilor, paraziților, virușilor și bacteriilor!

Și corpul este tratat de unul singur. Când este tratat, acesta elimină Cauza. Simptomele și boala dispar. Niciun motiv, nicio consecință! Logică și simplă! Lucrurile de geniu sunt simple! Marețea este în simplitate!

Există efecte secundare? NU, dar posibile crize !!!

Instrucțiuni de utilizare Zapper S5 AUTOMATIC

Ce înseamnă o criză de vindecare? Crizele de vindecare arată că procesele de curățare și vindecare apar în organism ca urmare a distrugerii în masă și a excreției de paraziți și toxine din organism! Simptomele crizelor de vindecare pot fi: greață, vărsături, tulburări, erupții cutanate, febră, oboseală etc.

Aceste crize posibile de vindecare ar trebui salvate, pozitiv. Toată murdăria acumulată în organism trebuie să iasă într-un fel. În caz contrar, trăim cu toată această "IUBIRE" în noi. Aceasta este adevărata trăire. Tratamente care tratează simptomele, si nu sarcina! Sunt o ușoară iluzie și parodie a tratamentului!

Este de dorit, împreună cu aparatul Zaperr S5- AUTOMATA, sa luati apă de argint și plante medicinale (pelin, nuc, cuișoare, armurariu, pădădie, ulei de oregano, etapa pisica)?

Apa de argint realizată cu Dr.Silver ajută la purificarea organismului de bacterii, toxine și zgură. Ambele dispozitive au proprietăți similare ale diferitelor acțiuni. Se completează reciproc, iar combinația dintre cele două dispozitive (sinergismul) este unică. Pur și simplu puneți perechea perfectă (yin și yang).

Fiecare plantă, în special în combinație cu alte plante aromatice ca plantele medicinale (pelin, nuc, cuișoare, armurariu, pădădie, ulei de oregano, etapa pisica), tot mai puternic și un efect de susținere pentru întregul organism.

De ce există schimburi de frecvențe care funcționează cu frecvențe și adaptoare diferite? Și cele care funcționează cu o frecvență universală de 30 kHz și o baterie de 9 V?

La începutul studiilor, dr. Clark a lucrat la frecvențe diferite. Dar asta spune ea mai târziu!

Studiile ulterioare au arătat că NU frecvențele diferite au distrus toți invadatorii. Eficiența s-a datorat frecvenței pozitive și faptului că Zapper lucrează cu BATERIE !!!

Presupun că electricitatea pozitivă aplicată oriunde pe corp atrage obiecte încărcate negativ, cum ar fi paraziții, virusii și bacteriile. Poate că tensiunea bateriei le apasă și le scoate din localizarea lor. Capacitatea de a distruge toți invadatorii de zapping / Zapper (numai 7 minute), poate deveni cu adevărat un panaceu! Nu este nevoie să se stabilească anumite frecvențe și să treacă pe rând, prin toate frecvențele killer pe kilohertz.

Când tensiunea suficientă (5-10 volți) (timp de 7 minute) și frecvența (care este cuprinsă între 10 și 30 kHz) fiecare frecvență pozitivă reglata ucide simultan toți paraziții, bacteriile și virusii.

Toți paraziții, virusii și bacteriile (mor pentru 7 minute la 5 volți) Generarea de frecvențe pozitive este cea mai bună

și o cale rapidă de distrugere a organismelor patogene. Un extras din cartea doctorului Hulda Clark

De ce a lucrat Zaperr S5-AUTOMATIC de peste 20 de ani în cadrul schemei Dr. Clark?

Cu o singură frecvență universală de 30 kHz și o baterie 9 v?

În afară de luarea în considerare a cercetării, a dovezilor și a logicii lui Hulda Clark.

Nu în ultimul rând, avem o experiență foarte personală!

Nu contează ce problemă de sănătate aveți. Nu poți înțelege ce anume parazit e în corpul tău, frecvența îl distruge cu un anumit motiv simplu. Din cauza simplului motiv că medicina modernă nu este încă "prezentă",

orice cercetare pentru a detecta prezența unui anumit parazit, virus sau bacterie.

De ce nu există astfel de cercetări? Fiecare persoană inteligentă medie poate răspunde la această întrebare!

Chiar și prin descoperirea (aproape imposibilă) a parazitului precis definit. Există o mare șansă de a "omite pe altcineva". Folosind diferite programe și frecvențe, riscați să omiteți pe cineva care nu a găsit un parazit, un virus sau o bacterie. Când lucrați cu frecvențe diferite sau programe diferite pentru un anumit parazit. Distrugeți numai acest parazit, dar ce se întâmplă cu alți paraziți, viruși și bacterii, care nu sunt detectate și diagnosticate?

Poate că, inconștient, dr. Hulda Clark a făcut încă un serviciu UNIQUE pentru public. Ea a creat un Zapper care ia dovedit-o, distrugând tot felul de paraziți, viruși

și bacterii. Poate fi folosit de oricine, fără cunoștințe în acest domeniu. Și fără a fi nevoie să căutați Parazitul exact și frecvența de a o distruge!

Pentru că, încă o dată vom repeta ceea ce spune dr. Clark!

Studiile ulterioare au arătat că numărul de frecvențe diferite au distrus toți invadatorii. Eficiența s-a datorat frecvenței pozitive și faptului că Zapper a lucrat cu BATERIA !!!

La o tensiune suficientă (5-10 volți) (durata de 7 minute) și frecvența (care este între 10 și 30 kHz). Fiecare frecvență pozitivă ucide simultan toți paraziții, bacteriile și virușii.

Toți paraziții, virușii și bacteriile (mor în 7 minute la 5 volți) Generarea de frecvențe pozitive este cea mai bună și o cale rapidă de distrugere a organismelor patogene.

De ce sa alegeti Zaperr S5- AUTOMATIC – ?

Peste 20 de ani de experiență în producția de produse inovatoare de către ingineri dovediți, fără compromisuri în calitate!

Absolut sigur pentru sănătatea umană, dar mortal pentru paraziți, viruși și bacterii!

Compact și ușor de utilizat, (AUTOMAT). Nu este necesară cunoașterea lucrului cu camera!

Ușor de deplasat (240 g). Poți să îl iei oriunde cu tine!

Mii de clienți sunt mulțumiți!

Consultări online gratuite și sprijin suplimentar, pentru o perioadă nelimitată de timp de către un reprezentant competent!

Preț accesibil!

Sușinim cererea Dr. Hulda Clark pentru tehnologie și am fost accesibili tuturor fără costuri și speculații inutile.

Zapper S5-AUTOMATIC pe lângă lucrul la schema lui Dr. Clark care afectează toate speciile, paraziții, virușii, bacteriile. De asemenea, acționează ca un efect de susținere asupra întregului organism, acționând și stimulând sistemul său imunitar. Acest lucru îl face mai rezistent la viitoarele atacuri ale paraziților. Vizibil îmbunătățește stilul de viață, îmbunătățește memoria și activitatea creierului. Un alt efect pozitiv al dispozitivului este accelerarea metabolismului la nivel celular (metabolismul), reducând astfel obezitatea și excesul de greutate.

Misiunea noastră sau de ce facem asta?

Ajutând mai mulți oameni să obțină informații utile și valoroase pentru a-și îmbogăți cultura sănătății. Cultura sănătății = Viața fără boli !!! Nu exzista boală incurabilă exzista bonlav!

Sănătatea este în mâinile tale!

Instrucțiuni de utilizare Zapper S5 AUTOMATIC

1. IMPORTANT: Zapper S5-AUTOMATIC nu este certificat produs medical! În acest sens, unitatea poate atribui dispozitive individuale pentru utilizare electrostimulare acasă cu obiectiv curățarea și distrugerea paraziților, virusurilor și bacteriilor. Aici dorim să se constate că diagnosticul Biorezonanta nu este analiza medical certificata, PARADOX! În același timp, este diagnosticul cu cele mai exacte și fiabile din lume, cu o precizie de 95%, cu privire la starea tuturor organelor și sistemelor! Nu în ultimul rând, detectează prezența unui număr mare de paraziți, viruși și bacterii prezente în organism! Niciun alt deși "cu certificate" nu oferă o astfel de diognostica cuprinzătoare, completa și exacta!

2. REZUMAT: Este important să înțelegeți și să realizați următoarele: Corpul Dvs. este Sistematica unica de vindecare. Capabil să vindece orice boală. Dar trebuie să i se dea Oportunitate, ajutor și sprijin. Pornind de la eliminarea cauzei bolii, a paraziților și a toxinelor! În această direcție de gândire, ne-ar plăcea

să mai spun încă o dată;

**Zapper S5-AUTOMATIC – În ciuda numeroaselor avantaje și efectele dovedite. NU INDEPARTEAZA BOLI! Îndepărtează cauzele bolilor și corpul este tratat!
"Scoateți cauza, apoi boala va trece" Hippocrates**

CONTRAINDICATII! A nu se utiliza de către persoanele cu cardiostimulatori, copii sub 5 ani, femei însărcinate și care alăptează!

Remarci !!!

Producătorul / comerciantul încearcă să publice pe site-ul <http://www.zaper.info/>, precum și în această broșură cuprinzătoare. Posibilele cele mai complete, verificate și utilizate informații personale, precise. În ciuda dovezilor, logicii și a faptelor! Producătorul / comerciantul nu garantează că informațiile furnizate pe site și aici sunt complet exacte, exacte, complete sau fără erori.

Producătorul / comerciantul și informațiile de aici și la <http://www.zaper.info/>, precum și produsele pe care le oferă, nu sunt destinate să prescrie un tratament. Informațiile de pe site sunt făcute publice în context educațional general și pentru a vă informa! Poți să ajuți pe cineva arătându-i drumul potrivit. Dar nu-l poți ajuta dacă nu o ia singur! Înainte de a începe tratamentul, adresați-vă medicului dumneavoastră!

6. SET LA LIVRARE

6.1 Generator de bio unde „Zapper” S5-AUTOMATIC – 1 buc.

6.2 Baterie – 1 buc.

6.3 Descrierea tehnică și instrucțiunile de utilizare – 1 buc.

6.4 Ambalare – 1 buc.

7 CONDIȚII DE GARANȚIE

Respectarea regulilor acestei instrucțiuni se face în interesul utilizatorilor și este o condiție pentru performanța condițiilor de garanție.

Generatorul de bio, Zapper S5-AUTOMATIC, este fabricat în conformitate cu specificația tehnică TC-GM-12-2010 și corespunde documentației tehnice. Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice în schema de circuit, păstrând în același timp toate caracteristicile tehnice și funcționale ale aparatului. Producătorul, prin intermediul distribuitorului, asigură serviciul de garanție în 24 / douăzeci și patru de luni, cu condiția ca toate condițiile pentru funcționarea corectă sunt îndeplinite.

Dacă aparatul este returnat, trebuie să furnizați cardul de garanție.

În cazul în care condițiile de exploatare nu sunt îndeplinite, revendicarea nu este respectată, iar repararea aparatului este plătită de către client. Compania nu acceptă creanțe în următoarele cazuri:

- este o încercare de a elimina defectele de la persoane neautorizate;**
- condițiile de funcționare specificate nu sunt îndeplinite în această "descriere tehnică și instrucțiuni de utilizare";** - daunele sunt cauzate de transportul incorect;
- cumpărătorul nu a furnizat un card de garanție;**
- daunele sunt cauzate de factori chimici sau fizici externi în timpul perioadei de funcționare;**
- abaterile în funcționarea aparatului sunt rezultatul unei baterii descărcate.**

Când cumpărați aparatul, verificați finalizarea corectă a cardului de garanție, în care trebuie menționată data achiziționării produsului, numărul fabricii, semnătura vânzătorului și sigiliul companiei. Țineți cardul de garanție, vă oferă dreptul la reparații gratuite în perioada de garanție.

CARD DE GARANTIE

Denumirea produsului:
Generator de bio unde Zapper” S5-AUTOMATIC
Producator: Idelbulgar EOOD www.zaper.info/

Consultant:

.....
.....

Telefon:

.....
.....

Client:.....

.....
.....

Data:

Numar produs fabric:.....

Adresa de serviciu: Sofia c.p 1000, str. Knyaz Boris I № 162

.....
.....

telefon.....

.....
.....

Perioada de garanție - 24 de luni de la data vânzării în conformitate cu regulile de funcționare a aparatului. Garanția se pierde în cazul defecțiunilor mecanice rezultate din depozitarea și operarea necorespunzătoare, precum și în cazul reparațiilor neautorizate.

Sunt posibile erori de imprimare!

Instrucțiuni de utilizare Zapper S5 AUTOMATIC

Caracteristici suplimentare

Intensitatea inducției magnetice AC emise
de o antenă tipărită, μT ;

№	Loc de masurare	Intensitate pe inducție magnetice μT	Timp admisibil
1.	La 1 sm din panou din spate	0,063	nelimitat
2.	La 5,0 sm din panou din spate	0,052	nelimitat
3.	La 10 sm din panou din spate	0,026	nelimitat
4.	La 20 sm din panou din spate	0,016	nelimitat
5.	La 30 sm din panou din spate	0,010	nelimitat
6.	La 50 sm din panou din spate	0,009	nelimitat

IMPORTANT !!!!

Pentru efectul cel mai pronunțat al câmpului electromagnetic, aparatul ar trebui să fie plasat direct pe organul sau locul afectat, precum și într-o altă zonă a corpului, în contact direct cu dumneavoastră. În timp ce țineți electrozii! Câmpul electromagnetic nu funcționează fără contactul electrozilor !!!

